

1. Kaapin sijoittelu
2. Kaappi asennetaan seinälle tai telineeseen.
3. Sähköliitäntä Jännite 230 V, suojataan vikavirtasuojakytkimellä
4. Lämmittimen ja puhaltimen testaus virran ollessa päällä (ON)
5. Tekniset tiedot
6. Kunnossapito/puhdistus

1. Suositeltu asennuskorkeus (katso piirustus)


Kaappi on valmistettu kestämaan ripustaminen kaikissa tavanomaisissa olosuhteissa.

Kunnossapidon kannalta on hyvä aina ripustaa sydämenkäynnistinkaappi siten, ettei siihen kohdistu suoraa auringonvaloa


Jos kaappi asennetaan katoksen alle siten, ettei se altistu sateelle (*sadevedelle*), suositellaan kaapin pesemistä säännöllisesti, koska muuten siihen saattaa muodostua kerrostumia.

Ympäristö:	Sisä- ja ulkokäyttöön
Tiiviysluokka:	IP 43 - sateenpitävä, mutta ei saa huuhtoa.
Korkeus:	voidaan käyttää korkeintaan 2000 metrin korkeudessa
Lämpötilat:	-20...+40 °C.
Suhteellinen kosteus:	0–80 %
Ylijänniteluokka:	Cat II
Saasteluokitus:	Luokka 2

Wall side view

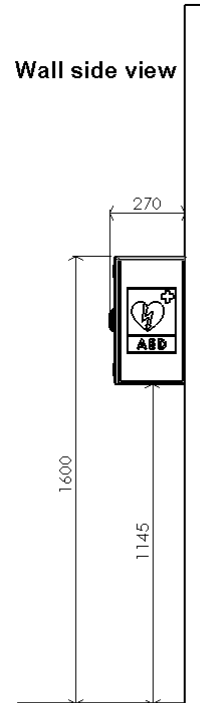

Wall viewed from the front

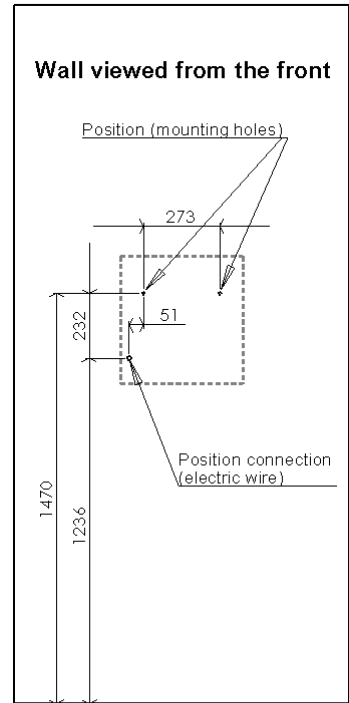

2. Kaappi asennetaan seinälle tai seistä, läpi 2 reikää takalevy.

(Seinän on oltava suora ja kestävä. KAAPPIA EI SAA VÄÄNTÄÄ)



3. AINOASTAAN VALTUUTETTU SÄHKÖASENTAJA SAA TEHDÄ SÄHKÖASENNUKSEN

Kaapin Pitäisi jännite on 230 V. Suosittelemme käyttämään omaa ryhmäänsä.


PG M16 ja suojatappi voidaan asentaa kiinteästi kaapin taakse tai pohjaan, asennustavan mukaan.



Kierrä auki kahta LED-valolla varustetun suojalevyn kuusiokulmaruuvia ja työnnä levy sivuun.



Sen takana on ohjausyksikkö, johon Vaihe-, nolla- ja suojajohtimet liitetään.

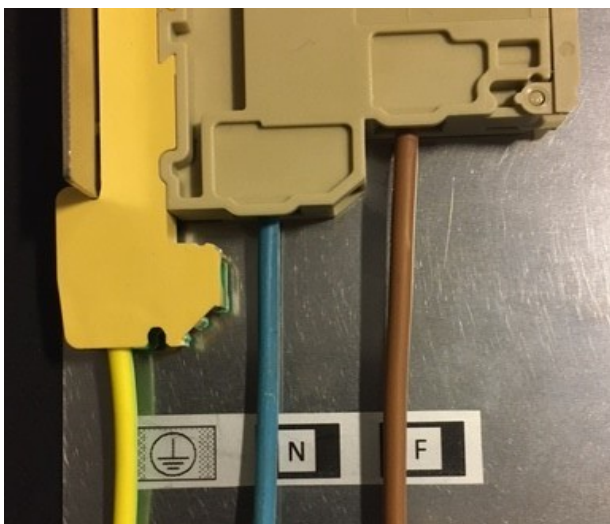

-
4. Laitteen itsetestausta 1-2 kertaa vuodessa suositellaan puhaltimen ja lämmityselementin toiminnan varmistamiseksi. Kytke virta pois päältä. Kun virta kytketään uudelleen päälle kuuluu äänimerkki ja itsetestaus käynnistyy. Lämmityselementti ja puhallin käyvät yhden minuutin ajan, jonka jälkeen kuuluu äänimerkki itsetestauksen päättymisen merkiksi. *(Kokeile kaapin oikeanpuoleisesta pohjalevystä, onko lämmityselementti lämminnyt. Jos se ei ole lämmin, toista testi 2-3 kertaa.)*
-

5. Tekniset tiedot:
Sähköliitäntä ON suojattava 30mA:n HFI-vikavirtareleellä.
Vaihtojännitesyöttö 230 VAC. 50 Hz. Maksimisulake maks10A. (Vaihe, nolla ja maa)
Ulkoakaapeli, 3 x 1,5 mm² sulakkeen kiinnikkeelle, jossa on 2A hiekkatäytteinen sulake Ø5x20 – murtokyky 1500A
(RS-tuotenumero 563-413A)

Virrankulutus normaalikäytössä = 40 mA / 10,2 W

Suurin virrankulutus lämmitin mukaan lukien = 289 mA / 66 W

6. Kunnossapito/puhdistus:
Suosittelemme puhdistamaan kaapin säännöllisesti vähintään 1-2 kertaa vuodessa. Käytä puhdistukseen sulfoa kosteassa rätissä tai harjassa ja huuhtelee sen jälkeen puhtaalla vedellä. Kuivaa aina lopuksi kuivalla rätillä. Mahdolliset jäänteet näkyvät kerrostumina pinnalla, josta ne on helppo pyyhkiä pois. Vaikeammin puhdistettaviin voidaan käyttää hankaussientä. **Älä käytä milloinkaan teräsvillaa.**
-